


ALBAcheck® - BGS AB Serum (savó) (emberi)

REF Z281



IVD

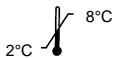

A CÍMKÉN LÁTHATÓ SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

LOT

Gyártási szám



Lejáratú idő (ÉÉÉÉ-HH-NN)



Tárolási hőmérséklet-tartomány (2 °C – 8 °C)

IVD

In vitro orvosi diagnosztikai eszköz



Tájékoztadjon a használatú útmutatóból

www.quotientbd.com



Gyártó

REF

Termékkód

BEVEZETŐ

Az AB savót többféleképpen használják a vércsoport-szerológiában. Ez a termék használható bizonyos eljárásokban hígítóanyagként vagy semleges kontrollként.

FELHASZNÁLÁSI CÉL

Az ALBAcheck®-BGS AB Serum az immunohematológiában, hígításra vagy közömbös kontrollként használható.

A REAGENS LEÍRÁSA

A reagens vérérdők plazmáiból készült. A savóvá alakítást kalcium-klorid, és amikor szükséges volt, trombin hozzáadásával végezték. A kalciumfólsókat Na-oxalát hozzáadásával távolították el. A termék 1 g/l nátrium-azidot is tartalmaz.

Az üvegse cseppentője kb. 40 µl-nyi mennyiséget adagol. Ezt szem előtt tartva kell biztosítani minden vizsgálati rendszerben a megfelelő savó:sejt arányt.

Ez a reagens megfelel a 98/79/EK sz., az *in vitro* diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló irányelv követelményeinek és az Egyesült Királyság vértranszfúziós szolgálatának az útmutatójában (Guidelines for Blood Transfusion Services) lévő ajánlásoknak.

TÁROLÁSI FELTÉTELEK

A reagenst 2 – 8 °C között kell tárolni. Ne használjuk, ha zavaros! Ne hígítsuk! A reagens a termék címkén feltüntetett lejáratú időig stabil.

ELŐVIGYÁZATOSSÁG A HASZNÁLAT ÉS ELTÁVOLÍTÁS SORÁN

Ez a reagens 0,1% nátrium-azidot tartalmaz. A nátrium-azid robbanó elegyet képezhet az ólomból és rézből készült vízvezetékek anyagával. Ha lefolyóba öntjük, eresszünk utána bőséges mennyiségű vizet, hogy az azid ne halmozódik fel!

A vízi élővilágra ártalmas, hosszan tartó hatásokkal. Ügyelni kell arra, hogy ne kerüljön a környezetbe. A tartóedényt és tartalmát a helyi, regionális, országos és nemzetközi szabályoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

FIGYELMEZTETÉS: AZ ALAPANYAG, AMELYBŐL EZ A TERMÉK SZÁRMAZIK, NEMREAKTÍV EREDMÉNYT ADOTT A HBsAg, ANTI-HIV 1/2 AND ANTI-HCV VIZSGÁLATOKBAN. NEM ISMERETES OLYAN TESZT, AMELY BIZTOSÍTANÁ, HOGY AZ EMBERI VÉRŐL SZÁRMÁZÓ TERMÉKEK NEM VISZNEK ÁT FERTŐZŐ BETEGSÉGET. ENNEK A TERMÉKNEK A HASZNÁLATA ÉS ELTÁVOLÍTÁSA SORÁN MEGFELELŐ GONDOSSÁGGAL KELL ELJÁRNI.

A reagenst csak szakmai célra, *in vitro* szabad használni.

VIZSGÁLATI ELJÁRÁSOK

Általános tudnivalók

Az AB savót többféleképpen használják a vércsoport-szerológiában. A felhasználók gondosan ellenőrizték a reagens megfelelését, mielőtt konkrét eljárásokban alkalmaznák azt.

KONKRÉT VISELKEDÉSI JELLEMZŐK

Az ALBAcheck®-BGS AB Serum készítményt anyagok viselkedésének vizsgálati során tesztelték komerciális panelekből származó jól karakterizált vörösvérsejtekkel szemben. Az ALBAcheck®-BGS AB Serum viselkedése 100% mértékben összhangban volt a várt vizsgálati eredményekkel.


A TELJESÍTŐKÉPESSÉG KORLÁTAI

Álpozitív vagy álnegatív eredmények állhatnak elő a vizsgálati anyagok szennyeződése, nem megfelelő reakció-hőmérséklet, anyagok helytelen tárolása és vizsgálati reagensek kihagyása következtében.

A KIADÁS DÁTUMA

2019-12-17

További információkért vagy tanácsért forduljon a helyi forgalmazóhoz.

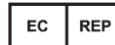

Quotient Suisse S.A.
Unit B1 Terre Bonne Business Park
Route de Crassier 13
Eysins 1262, Switzerland



Alba Bioscience Limited,
James Hamilton Way,
Penicuik, EH26 0BF,
UK

Tel.: +44 (0) 131 357 3333
Fax: +44 (0) 131 445 7125
E-mail: customer.serviceEU@quotientbd.com

INSTRUCTIONS FOR USE

Instructions for Use are available on Quotient website at www.quotientbd.com or can be requested from your Local Distributor, by providing the relevant Product Code stated on product labels and Instructions for Use supplied with the product.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A használati útmutató megtalálható a Quotient weboldalon (www.quotientbd.com), illetve igényelhető a helyi forgalmazótól a megfelelő termékkód megadásával, amely fel van tüntetve a termékcímkéken és a termékhez mellékelt használati útmutatón.